

开背舒®
iback

智能按摩坐垫

OG-1001

使用手册



OGAWA

奥佳华

融入生活 享受健康

奥佳华中国官网：www.ogawaworld.net.cn

OG-1001 iBack2 开背舒

感谢您购买奥佳华 iBack2 开背舒智能按摩坐垫，使用前请仔细阅读操作手册，并特别注意安全事项，以便正确操作和使用本产品。

本手册提供使用者安全及有效的操作方式，请在阅毕后妥为收藏，以便日后参考查询。

安全指引	2
保修权限	6
产品特性	7
使用前准备	8
产品操作	9
产品规格	12
故障排除	13
产品保养	14

安全指引

a) 重要安全事项说明

- 为确保安全及正确使用产品，使用前请务必详细参阅操作手册。
- 请务必依照本操作手册内的产品用途使用本产品。
- 使用完毕后或清洁产品前，请将电源插头从插座中拔除。
- 请务必谨慎使用温热功能，以避免可能会导致严重灼伤。请勿用于感觉迟钝和过于敏感的皮肤或血液循环不良的部位。切勿让儿童或者身心功能障碍者自行使用温热功能，操作不当可能存在危险。
- 为避免因过热而导致走火、触电、或造成伤害，请勿将产品置于枕头或毯子下操作。
- 请勿覆盖使用，以免造成马达温度过高而导致故障或损坏。
- 若产品使用或接近儿童，身心功能障碍与伤残者，需要有旁人指导且能负责其安全。
- 如在按摩进行中感到不适，请立即停止按摩。
- 下列状况发生时，切勿使用本产品：电源线或电源插头损坏；操作不正常；曾掉落地面或者损伤；曾落入水中。请联系维修服务进行检查和维修。
- 请勿使用非制造商所推荐的零配件。
- 请勿将物品插入或者掉落产品的任何开口中。
- 若想切断电源，请将所有的操作控制关闭后，将电源插头由插座中拔除。

- 本产品不能作为自我诊断或治疗之用，如需要诊断或治疗，应由专业医疗人员处理。

b) 使用环境

- 请勿在潮湿或过多灰尘的环境下使用产品，以免产品发生故障。
- 请勿在室温高于 40°C 的环境下使用本产品。
- 请勿将产品放置户外。
- 请勿将产品置放于电热器、炉具附近或者阳光直射处。

c) 不适宜使用本产品的人士

如果您有以下情形，使用前请先咨询医生。

- 正在接受医生治疗者或身体感觉不适者
- 高血压、心脏病、动脉硬化、脑血栓患者
- 患有恶性肿瘤者
- 孕妇及月经期妇女
- 患有骨质疏松症
- 正在使用心脏起搏器或者植入医疗器者
- 患有急性疾病者
- 未成年人及身心功能障碍者

d) 开关注意事项

- 请勿用湿手操作控制开关。
- 请勿让控制开关接触水等液体。

e) 使用电源插头及电源线须知

- 请勿用潮湿的双手安插或者拔除电源插头，以免触电或者导致机件故障。
- 拔出电源插头时，请握住插头本身，切勿拉扯电线。
- 虽然 15 分钟自动定时功能会自动停止产品操作，仍请每次使用完毕后，务必将主电源切断。
- 电源线务必和加热表面保持安全距离。
- 请勿将电源线置于产品或任何重物之下。
- 请勿将电源线缠绕于产品上，以免电源线受损而导致触电或者电线走火。
- 当电源线或者电源插头损坏时，切勿继续使用产品。
- 电源插座有松动的状况时，请勿使用产品。
- 请勿用电源线移动产品，或将电源线当握把使用。
- 当电源线损坏时，必须由服务中心或经授权技术人员进行检查及维修。

注意!

- 请勿在产品操作时入睡。
- 请勿在酒醉或身体不适时使用本产品。
- 请勿直接将按摩头贴近手部、肘关节、膝盖、胸部或腹部。
- 连续使用本产品请勿超过三十分钟。
- 若产品的布套已经破损，请勿使用。
- 请勿在进食前后一小时使用，以免造成不适。
- 在偏低室温中使用产品时，建议将室温逐渐调至正常范围后再使用。
- 若是将产品由低温储存处移至温暖环境使用时，可能会因为机件内水汽聚集而影响产品正常运作，甚至造成机件故障。建议移动后，先将产品在正常室温放置 1 小时后再开始使用。
- 使用中察觉任何机件故障或不正常状况，请立即停止使用。
- 若在使用中发生电流中断的状况，应注意避免因电力突然恢复而造成使用者受伤
- 雷电情形发生时，不宜使用本产品。

保修权限

1. 本保修权限不可转让。
2. 自用户购机之日起在保修期内可享受全免保修（外表不在保修范围内）。
3. 本产品有效保修期为一年。
4. 当要求保修服务时，请出示原始购买凭据及保修卡。
5. 购买时间以专柜开出的有效单据为准。
6. 此保修范围不适用于租赁、交易、商业、机构及其他居民使用者。
7. 以下情形不属于保修范围，但提供有偿维修服务（收取人工费和材料费）
 - (a) 一切人为因素损坏，包括非正常工作环境下使用，不按说明书使用和保管，使用不当引起的损坏等；
 - (b) 用户私自拆机、自行维修、改装或未经本公司授权的第三方拆动、改装、维修；
 - (c) 购买后因自行不良运输造成的损坏；
 - (d) 因其他不可抗力因素（如水灾、火灾、雷击和地震等）造成的损坏。

产品特性

十二摩头开背

十二个按摩头，全力开背，释压舒活

异步摇摆按摩

创新异步摇摆按摩手法，带来由背至腰的全效放松

弹力贴身揉捏


弹力按摩机构，贴服腰部曲线，夹揉推拿，按摩更舒适

温热呵护放松

12个按摩头一键加热，舒压模式自由畅享

使用前准备

- 产品附有固定带，可用于各式座椅。
- 将产品置放于座椅上，将两条固定带向后环绕住椅背，再将魔术贴黏合固定。

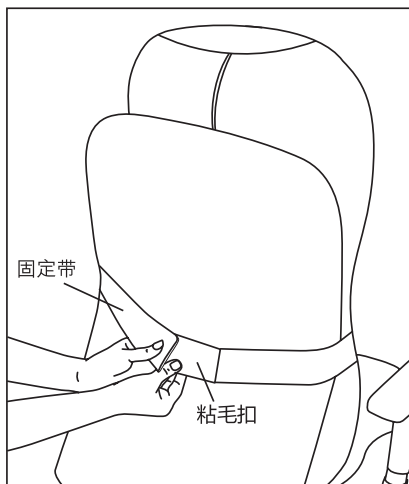

产品操作

1. 开启电源开 / 关

- 将电源插头插入市电 220~ 插座上；
- 按手控器上 [电源] 键启动产品功能并依手控器操作说明选择相应按摩模式；
- 停止使用时，请按手控器上 [电源] 键关闭产品功能。
- 关闭产品功能后，按摩机构将自动复位，请待复位完成后再将电源插头从电源插座中拔除。



2. 手控器操作说明

1、电源

- 按电源键一下，控制器电源指示灯亮，默认开启背部异步揉捏手法，慢档按摩功能，同时进入 15 分钟定时，再按一下电源键或 15 分钟定时时间到，按摩器所有功能停止工作，背部按摩机构复位（电源灯闪烁），复位完成后电源指示灯灭。

2、自动模式

- 在开机状态下，此键才有效；按此键进入自动模式，同时相应指示灯闪烁。

3、同步

- 在开机状态下，此键才有效；按此键开启背部同步揉捏手法按摩，同时相应指示灯亮。

4、异步

- 在开机状态下，此键才有效；按此键开启背部异步揉捏手法按摩，同时相应指示灯亮。

5、速度

- 在背部按摩功能开启状态下，此键才有效；按此键选择背部揉捏强度，在慢档——快档间循环切换，同时相应指示灯亮。

6、温热

- 在背部按摩功能开启状态下，此键才有效；按一下此键，开启温热功能，温热指示灯亮；再按一下此键，关闭温热功能，温热指示灯灭。

注意！

- 建议每次按摩时间请勿超过 15 分钟。
- 若在按摩进行中感到不适，请立即关闭电源。
- 产品闲置不用时，请确定电源插头已从电源插座中拔除。
- 如发生电源故障，请关闭电源并拔掉电源插头，以免产品在电源突然恢复的情形下重新操作。
- 为确保您的安全，产品设置了 15 分钟自动关闭电源的功能，产品使用 15 分钟后或者按下电源开关按钮，关闭产品功能时，按摩机构将自动复位，如在使用中，电源突然中断，电力恢复时，按摩机构会先自行复位。

产品规格

产品名称	iBack2 开背舒
产品型号	OG-1001
额定电压	220V~
额定频率	60Hz
额定功率	60W
执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008
定时时间	15 分钟

故障排除

若在使用此产品时遇到问题，请参考下列几点提示及可能解决方式。若此产品仍处于故障状态请将产品送至服务中心或经授权技术人员进行检查及维修。

异常情况	可能原因	处理方法
无法开机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未通电 2. 手控器电源开关未开启 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 接入电源或检查电源插头是否插好 2. 开启开关键
突然停止操作	<ol style="list-style-type: none"> 1. 断电 2. 按摩时间超过 15 分钟 3. 连续使用时间过长，产品过热保护 4. 施力过大，按摩机构停止运转 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检查电源插头是否插好 2. 重新开启电源开 / 关 3. 产品冷却后重新开启电源开 / 关按钮 4. 重新启动电源开 / 关按钮

产品保养

a) 贮藏

- 不使用时，请将产品放入包装盒中，并放置于安全、干燥、通风、阴凉处。
- 切勿扭曲电源线。
- 切勿使用电源线悬挂产品。
- 避免尖状物刮破产品表面。
- 请勿将产品放置在阳光直射或高温处。

b) 清洁

- 清洁之前，确认总电源开关已关闭，并拔出电源插头。
- 请使用干布清洁产品表面。

* 注意

- 切勿使用具有腐蚀性的清洁剂，如苯或稀释剂来清洁产品。
- 切勿以湿布清洁手控器，以免故障。

c) 保养

- 保持产品清洁并远离高湿度的场所。
- 如果长时间不使用本产品，请用防尘罩（请自行购买）套住产品，防止落入灰尘。

联系我们

厦门蒙发利营销有限公司

地址：厦门市思明区前埔路 168 号

邮编：361008

服务热线：400-885-9880

华东区域

洽谈电话：021-62120981

地址：上海市普陀区曹杨路 505 号 901 室（尚诚国际大厦）

华北区域

北京洽谈电话：010-58670435

地址：北京市朝阳区东三环南路 58 号富顿中心 A 座 2309-2311 室

河北洽谈电话：0311-83830323

地址：石家庄市中山西路 188 号中商务中心 A 座 501 室

华中区域

洽谈电话：027—85605586

地址：武汉江汉区北湖西路城市之光 B 栋 2 单元 1101 室

华南区域

广州洽谈电话：020-81406933

地址：广州市天河区珠江新城马场路 28 号富力盈尊广场 B1 栋 2302 室

深圳洽谈电话：0755-83864141

地址：深圳市福田区华强北群星广场 A 座 1008

东北区域洽谈电话：024-85611694

地址：沈阳市铁西区建设中路第一商城 B 栋 11 楼 02 室

西北区域洽谈电话：029-89284711

地址：西安市高新四路 1 号高科广场 A 座 2205 室

西南区域洽谈电话：028-61388807

地址：成都市武侯区人民南路四段 11 号大陆国际 2006



奥佳华官方微信二维码

Ogawa is grateful
to have received
these awards:



PUTRA
BRAND AWARDS 2010
SILVER
in association with
MALAYSIA'S MOST VALUABLE BRANDS

制造商：奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 地址：厦门市前埔路 168 号